



VIDA FIA GO

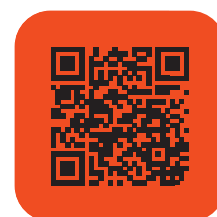

Acesse o site
e confira.

- Baseado na detecção da fluorescência emitida durante um imunoenensaio com a interação antígeno-anticorpo.
- Projetado para fornecer resultados de testes quantitativos ou qualitativos pelo exame de amostras humanas com unidades específicas de teste de diagnóstico *in vitro*.
- Oferece as vantagens de alta precisão, forte estabilidade e resultados rápidos.

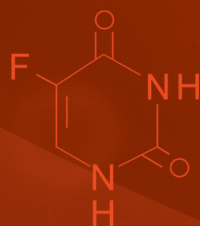

Evoluir para
transformar

 **vida**
BIOTECNOLOGIA

- Operação simples plug e play suportada por cartões de identificação, eliminando a necessidade de calibração a cada vez.
- Ideal para situações de emergência com operação leve e fácil.
- Resultados de Testes Quantitativos – Críticos para decisões terapêuticas de emergência.
- Opção de modo de leitura rápido – Economia de tempo.
- Opção de conexão ao sistema de informações do laboratório.
- Bateria recarregável de íons de lítio para uso mais conveniente.
- Realiza leitura de cassetes com marcador Európio.

Especificações técnicas:

- Princípio: imunoenensaio de fluorescência
- Formato de teste: cassete
- Medição: quantitativa e qualitativa
- Tempo de leitura: < 10 segundos
- Visor: tela de toque LCD de 4,3"
- Fonte de alimentação: 2*4300mAh
- Dimensões (L*W*H): 220*100*75 mm
- Peso: <1,5 kg
- OS: programa proprietário compatível com Windows
- Condição de trabalho: 4 a 30 °C
- Conectividade: porta USB, Bluetooth, porta COM RS232
- Bateria embutida: bateria recarregável de íons de lítio
- Compatibilidade: LIS, HIS

